


ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES



▲ 790+2F

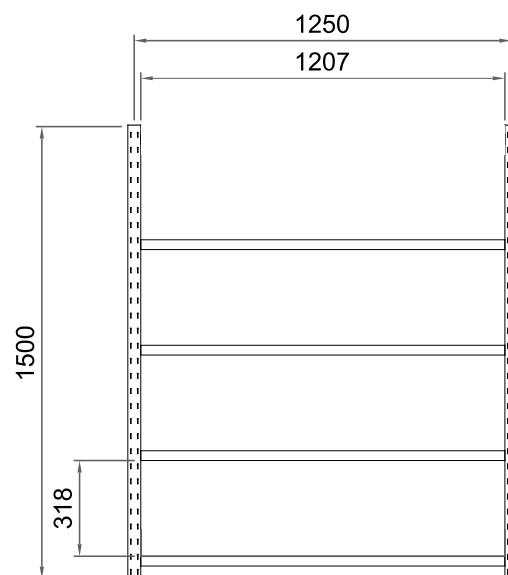

▲ RR2F4



Déplacement
par transpalette
(à vide)

CONFORMITÉ

- Résistance 90 minutes au feu selon la courbe 834-1.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010, à la directive européenne 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1.

AVANTAGES

- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire, pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture.
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10e +peinture époxy blanche RAL 9010.

- Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermique.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Rétention 100%.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Joints de porte thermodilatants.
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diam. 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Rayonnage de rétention 4 niveaux (RR2f4) avec 75kg par niveau uniformément répartis.
- Rayonnage renforcé de rétention 4 niveaux (RR2f4MAX) avec 150kg par niveau uniformément répartis.

Réf.	Description	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
790+2F	Armoire à équiper	2050 ⁽¹⁾ x 1502 x 903	1685x1350x695	622
RR2F4	Rayonnage de rétention 4 niveaux pour armoire 790+2F	1500 x 1250 x 600	-	40
RR2F4MAX	Rayonnage renforcé de rétention 4 niveaux pour armoire 790+2F	1500 x 1250 x 600	-	60

(1) Hauteur avec le raccord d'extraction d'air. Hauteur sans raccord : 2000 mm