

EN
14470-1

EN
1363-1

EN
16121

FM
6050

90
HOMOLOGUÉE
EN14470-1

105
TESTÉE SELON
EN14470-1



Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs


Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM 105 MINUTES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES EMBARQUÉS EN TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS MARITIMES



Kit pour fixation murale

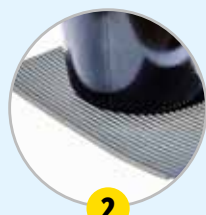

Tapis anti-dérapant



Fixations au sol



Option serrure à code SERCODE (1 par porte)

▲ 795+PJBE + C235

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual International).
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (ouverture/fermeture de 80000 cycles et mise en place de la charge définie par le constructeur sur les étagères).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Construction double parois :
- Parois extérieures en acier 12/10e, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
- Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Joints de porte thermo-dilatants.
- Étagères de rétention réglables en hauteur (au pas de 6,4 cm) et bac de rétention amovible en partie basse. Le bac de rétention doit être positionné en bas de votre armoire. Dans la mesure où vous souhaiteriez l'utiliser comme espace de stockage, vous devez impérativement y placer, au préalable, un caillebotis (voir

- options) correspondant à votre bac de rétention.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-réglée à 47°C.
- Conduits de ventilation avec système thermo-fusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm pour un raccordement éventuel.
- Kit pour fixation murale pour prévenir des mouvements marins.
- Tapis anti-dérapant, afin d'éviter le glissement éventuel des récipients lors de mouvements marins.
- 3 fixations au sol par vissage.

OPTIONS

- Renforts d'étagères pour charge admissible de 75kg uniformément répartis.
- Étagères supplémentaires.
- Caillebotis pour bac de rétention
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
 - Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte).

SÉRIE 790+B

EN
14470-1

EN
1363-1

EN
16121

FM
6050

90
HOMOLOGUÉE
EN14470-1

105
TESTÉE SELON
EN14470-1

RSE

FABRICATION
FRANÇAISE



▲ 794+BE



▲ 798+BE



▲ 795+BE

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte		Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids max. par étagère (kg)	Poids (kg)
blanche	jaune ⁽⁴⁾						Étagère de rétention	Bac de rétention		
791+BE	791+PJBE	Armoire équipée	sous table	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	1	1	30	127
792+BE	792+PJBE	Armoire équipée	sous table	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	1	1	50	213
793+BE	793+PJBE	Armoire équipée	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	115	2	1	50	297
798+BE	798+PJBE	Armoire équipée	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	65	2	1	30	182
794+BE	794+PJBE	Armoire équipée	haute	1	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	130	3	1	30	287
795+BE	795+PJBE	Armoire équipée	haute	2	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	250	3	1	50	453
795+900BE	795+900PJBE	Armoire équipée	haute	2	1950 x 905 x 620 ⁽³⁾	200	3	1	40	438

ACCESSOIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+	30 x 485 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+	30 x 992 x 285	3
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm ⁽¹⁾	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	30 x 992 x 410	4
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	30 x 760 x 410	4
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+	90 x 470 x 305	3
C2	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+	90 x 980 x 305	6
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 395	3
C35	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 975 x 395	6
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 747 x 400	5
T48	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	80 x 420 x 380	6
T35	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	80 x 930 x 380	12
SE148	Surétagère rétention PVC pour E48 (pour modèle E35, 2 pièces par niveau)	30 x 488 x 377	3
SB148	Bac de rétention en PVC pour armoire à 1 porte en L : 670 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 471 x 409	5
TP148	Toit en pente pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	235 x 640 x 620	10
TP235	Toit en pente pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	235 x 1140 x 620	20
SERCODE	Serrure à code numérique équipé de sa clé de sécurité	-	1
SERCODEH	Serrure à code numérique horizontal pour ref 791+ et 792+	-	1

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

(4) Non tenue en stock