



OSHA®



## ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours




▲ SC45



**1**  
Fermeture à thermofusible (selon modèle)



**2**  
Étagères réglables sur crémaillères

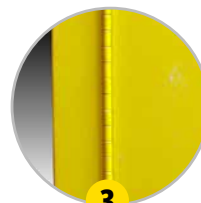

**3**  
Charnières continues



**4**  
Poignée de porte intégrée



**5**  
Ventilation avec grille pare-flammes



**6**  
Fond étanche de rétention



**7**  
Armoires superposables



**8**  
Caisson à recirculation d'air

### CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et FM (Factory Mutual international).

### AVANTAGES

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

### SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

### SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pare-flammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

### OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- **7** Certaines armoires de sécurité FM de la série 2 sont superposables avec celles de la série 4. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
- **8** Bénéficiez de la technologie Labopur sur votre armoire de sécurité grâce au caisson Labopur dont le système de ventilation/filtration et la capacité d'adsorption des filtres ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.

# SÉRIE 2



Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Réf.	Fermeture des portes	Désignation	Dimensions Ext. H x L x P (mm)	Dimensions Int. H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Charge max. admissible par étagère (kg)	Poids (kg)
MB04	Manuelle	Armoire sous-pailasse 1 porte	610 x 430 x 430	470 x 349 x 349	15	6	1	100	26
SB04	Automatique								28
MB12	Manuelle	Armoire comptoir 1 porte	960 x 610 x 460	775 x 508 x 370	45	10	1	100	47
SB12	Automatique								49
ES12	-	Étagère supplémentaire pour armoire 45L						-	3
MB18	Manuelle	Armoire sous-pailasse 2 portes	610 x 1090 x 460	515 x 1005 x 390	64	20	1	100	58
SB18	Automatique								60
ES18	-	Étagère supplémentaire pour armoire 64L						-	4
MB22	Manuelle	Armoire haute 1 porte	1650 x 585 x 460	1537 x 508 x 370	83	10	3	100	86
SB22	Automatique								88
ES22	-	Étagère supplémentaire pour armoire 83L						-	2
MB30	Manuelle	Armoire comptoir 2 portes	1120 x 1090 x 460	1006 x 1003 x 370	113	20	1	100	88
SB30	Automatique								90
ES30	-	Étagère supplémentaire pour armoire 113L						-	4
MC45	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1650 x 1090 x 460	1537 x 1003 x 370	170	20	2	100	121
SC45	Automatique								123
ES45	-	Étagère supplémentaire pour armoire 170L						-	4
MC60	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1650 x 860 x 860	1537 x 781 x 771	228	30	2	100	149
SC60	Automatique								151
ES60	-	Étagère supplémentaire pour armoire 228L						-	8
MC90 <sup>(1)</sup>	Manuelle	Armoire haute 2 portes	1650 x 1090 x 860	1537 x 1003 x 771	340	40	2	100	177
SC90 <sup>(1)</sup>	Automatique								179
ES90 <sup>(1)</sup>	-	Étagère supplémentaire pour armoire 340L						-	10

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Récipients

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours

(1) Modèles non tenus en stock et non représentés en photos.



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition juillet 2021