




SORBONNES À RACCORDEMENT EXTÉRIEUR



▲ BH09D+ + BB09

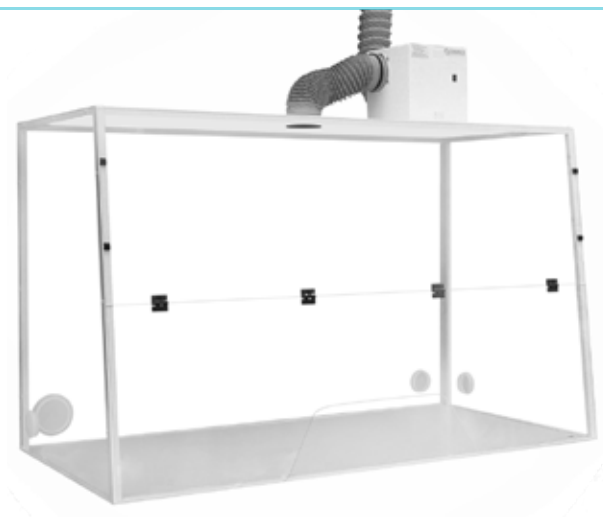

▲ BH15Z+ + BB15 + CDV-A + 2 KRC

UTILISATION

Ces hottes sont destinées à être raccordées à un système de ventilation⁽¹⁾ pour un rejet des vapeurs toxiques et nocives vers l'extérieur du bâtiment (utilisation sans filtre à charbon actif). Il est impératif d'y ajouter un caisson de ventilation - modèle CDV-A (à compléter impérativement de 2 kits de raccordement référence KRC ou à raccorder à un système d'aspiration adapté).

AVANTAGES

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation (pas d'assemblage), à relier uniquement au réseau électrique et à un système d'évacuation des vapeurs.
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant ainsi un éclairage optimal du plan de travail et une visualisation immédiate des produits manipulés.
- Passages de main ergonomiques permettant des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte (à choisir).
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation en énergie des appareils et en fluides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010, haute résistance contre les produits chimiques.
- 4 côtés en paroi vitrée (PMMA) d'épaisseur robuste 6 mm
- 4 opercules pour passage alimentation.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- Caisson de ventilation.
- Kit de raccordement.
- Plan de travail en mélaminé.
- Plan de travail en verre trempé.
- Bac de rétention amovible.
- Éclairage extérieur.
- Tables fixes et roulantes.

Référence	BH06D+	BH06Z+	BH09D+	BH09Z+	BH12D+	BH12Z+	BH15D+	BH15Z+	BH15G+	BH18Z+	BH18G+
Type de passage de main	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	Grande largeur	Trapèze	Grande largeur
Dimensions extérieures (L x P x H en mm)	600 x 650 x 745		900 x 750 x 945		1200 x 750 x 945		1500 x 750 x 945			1800 x 750 x 1240	
Dimensions intérieures (L x P x H en mm)	545 x 505 x 735		845 x 700 x 935		1145 x 700 x 935		1445 x 700 x 935			1745 x 700 x 1230	
Poids (kg)	41		67		85		102			125	
Accessoires complémentaires											
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB06 (10 kg)		BB09 (11 kg)		BB12 (12 kg)		BB15 (13 kg)			BB18 (15 kg)	
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV06 (15 kg)		BV09 (16 kg)		BV12 (17 kg)		BV15 (18 kg)			BV18 (20 kg)	
Caisson de ventilation	CDV-A (8 kg)										
Kit de raccordement	2 x KRC (2 kg)										
Éclairage extérieur latéral	LUD (Lumière extérieure avec déflecteur - à postionner à gauche)										

(1) Aucun modèle, même avec une connexion extérieure, n'est conforme à la norme NF X 15-211 - (05/2009).